

かん
健康チエア

KaiKair Chair

快適で楽な姿勢を保つ
人にやさしい
座位保持チエア



サイズバリエーション

体にあったサイズをお選びください

サイズ	S	M	L	LL	
適応年齢 (身長)	2~6歳 (90~110cm)	6~10歳 (110~130cm)	10~13歳 (130~150cm)	13歳~成人 (150~180cm)	
総重量	約4.5kg	約6.2kg	約8.5kg	約10.4kg	
各部の 寸法(mm)	A	600	710	830	910
	B	460	490	570	600
	C	550	610	670	720
	D	290	345	385	425
	E	200	230	260	290
	F	600	690	740	800
	G	250	310	400	450
	H	270	300	365	390
	I	210	230	270	300
	J	100	120	140	170
	K	470	570	670	740

保持力を高めるためには少し小さめがお奨めです。

完成品一式

本体セット (本体・肘カバー・スペーサー・シートベルト・サイドポケット)・ヘッドレスト・三角マット・シートパット (背部・腰部・座部) の10点セット ※単品の販売もしております。詳しくは販売特約店かHPにお問い合わせください。


オプション

■ **トップボード**
肘部分に取り付けて使用する簡易テーブルです。


小: S・M用

大: L・LL用

表面: PVCレザー

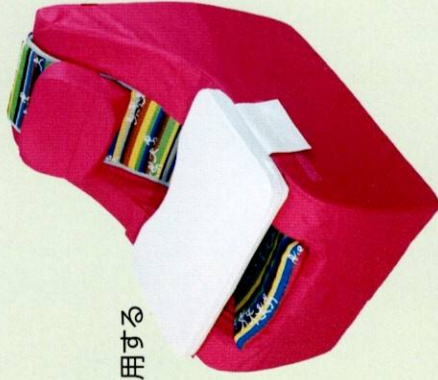

■ **ネックピロー (低反発ウレタン製)**

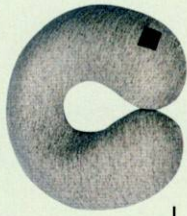

グレー

ネイビー

■ **シートパットセット (メッシュ / 座面・背もたれ)**

S・M・L・LL




■ **トリノテーブル**

ワンタッチ高さ調整式: H45~65cm (M~LL用)

テーブルサイズ: W75~90cm * D45~60cm * 18t

ご希望のサイズに合わせてカット致します。

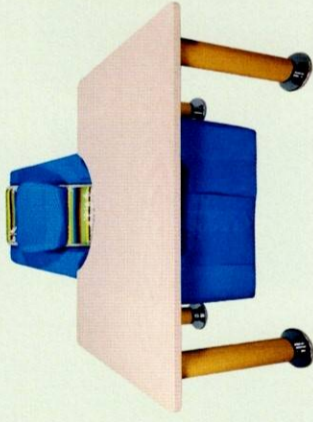

仕様

●ウレタン: #25●カバー: 綿100%●シートパット: [背部] ポリエステル・発泡ウレタン・ポリエステル (起毛加工) [腰部] ポリエステル・凹凸ウレタン [座部] ポリエステル・ジェルクッション・綿 (ウレタンビニールコーティング)

製造物責任保険加入済

販売特約店

Life support company

株式会社 USN

〒635-0104 奈良県高市郡高取町上子島153

TEL 0744-52-9023 FAX 0744-52-9013

[Email] support@usn-cc.com [HP] http://www.usn-cc.com



2023年4月改訂



かん 健康チェアとは

- 姿勢を保つことが困難な方が快適に座ることができるウレタンクッションチェア
- 子どもから大人まで、からだにフィットするサイズバリエーション
- 選べる色の組み合わせ

子どもから大人まで、うまく座ることができない方のための座位保持チェアです。体全体をやさしく包み込み、リラックスした姿勢を保つことができます。4つのサイズから選ぶことができ、首の座りのしつかりしていない幼児から、自分で体を保持できない高齢者まで幅広くご利用いただけます。ウレタンブロックで適度な弾力性と通気性を確保しています。



持ち手2ヶ所(背面)

本体カバー

肌への影響を考え、薬品による縮み防止加工はせず、体にやさしいコットンにこだわり採用しています。また、左右のカバーをマジックテープで留めて重ねることにより、取り外しが簡単になりました。

シートベルト

体のズレを防止するため、大きなパットで安定した姿勢を保ちます。

肘カバー

汚れやすい肘部分のカバーのみを取り外して洗濯することができます。カバーの下にシートベルトを通すことにより、スムーズに介助することができます。

ヘッドレスト

フィット感抜群の3D形状で、高さを調整することにより、頭部をしっかり支えます。

シートパット

明るい色調のレインボース生地を採用し、背部・腰部・座部分に分かれていますので、体に合わせて調整しやすくなっています。

背部



背部は5層構成で、表面はポリエステルプリント生地、内部は発泡ウレタン18tで、通気性を確保しています。裏面は起毛加工を施すことにより、ずれにくくなっています。

腰部



体が接する部分には凹凸のあるウレタン45tを使用し、クッション性と通気性を確保しています。

座部 ジェルクッション採用!



座面にはジェルクッションを採用し、S・Mサイズは2.5cm厚、Lは3.5cm厚で通気性と長時間の座り心地を追求しています。裏地にはお漏らし対応した防水透湿フィルム生地を使用しています。

座面スペーサー

シートパット(座部)の下の高さを補うクッションです。

三角マット

本体の角度調整に使用します。

三角マットの使い方

三角マットを使用することで、座位保持チェアとしてのチャイルド機能を発揮し、頭と体を安定させることができます。



三角マットなし



角度調整① 前傾斜



角度調整② 前傾斜



角度調整③ 後傾斜



角度調整④ サイド傾斜

カラーバリエーション

本体とシートパットの組み合わせによって、8つのカラーバリエーションから選べます。

※写真の色は実際の色とは若干の相違がある場合があります。

※洗濯すると色落ちする場合があります。洗濯機・乾燥機は使用しないでください。

Blue
ブルー



シートパット:赤



シートパット:緑

Gray
グレー



シートパット:赤



シートパット:緑

Pink
ピンク



シートパット:赤



シートパット:緑

Yellow
イエロー



シートパット:赤



シートパット:緑